
# CR'OS (IN RÉVOLUTION

El nuevo método 100% natural de reducción de grasa, remodelación corporal y lifting facial



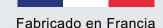

# El potencial de una técnica 100% natural

## Oportunidad de negocio

La demanda de procedimientos estéticos crece en todo el mundo a ritmo vertiginoso. La remodelación del cuerpo y el rejuvenecimiento de la piel son los más solicitados. Sin embargo, pasar por un cirujano plástico no es siempre posible. Por esto creemos que los salones de belleza, spas y centros de adelgazamiento son la mejor opción para poner estos procedimientos al alcance de todo el mundo.

## Más que una máquina de Criolipólisis

Creada en Francia en 2013, Cryoskin revolucionó el concepto de criolipólisis. Gracias a la pieza de mano con tecnología Peltier, Cryoskin permite destruir la grasa sin aspiración y sin dañar la piel mientras remodela el cuerpo. Además, ofrece tratamientos de toning corporal y lifting facial, lo que permite un retorno más rápido de la inversión.

## Plan Cryoskin para el éxito



Facial y corporal



Gran atracción de clientes



Rápida amortización

## De la evolución a la Révolution

Cryoskin Révolution es un concepto nuevo. Es una plataforma adaptativa que te permite ofrecer más tratamientos a medida que tu negocio crece.

La unidad principal permite operar todos los tratamientos Cryoskin con la pieza de mano: reducción de grasa y remodelación corporal, reducción de celulitis, tonificación y lifting de la piel...

En cualquier momento podrás añadir la unidad estática para ofrecer tratamientos manos libres de eliminación de grasa. No es necesario cambiar todo el equipo, simplemente conectar la unidad estática a la unidad principal.

Cryoskin Révolution se fabrica en Francia, bajo los estándares CE ofreciendo una calidad y rendimiento técnico inigualables.

Fabricado en Francia

Descubre cómo Cryoskin Révolution puede llevarte a un nivel superior...



## The Cryoskin Method

# CryoSlim®

CryoSlim® es un procedimiento no invasivo que permite destruir la grasa y remodelar la figura al mismo tiempo.

CryoSlim® ofrece resultados permanentes. A diferencia de otros precedimientos que vacían los adipocitos y debilitan la membarana, CryoSlim®los destruye completamente, limitando así su reaparición.

## ELIMINACIÓN DE GRASA

Una sesión dura de 26 a 45 minutos dependiendo del área del cuerpo y del programa. Hay una pérdida instantánea de centímetros al final de la sesión, pero el resultado final se logrará 2 semanas después cuando se completará la eliminación de residuos. Se recomienda hacer entre 5 y 10 sesiones dependiendo de la cantidad de grasa a tratar en cada zona del cuerpo. Los clientes pueden perder hasta 12 centímetros en 5 sesiones.

Una breve secuencia de calor inicial crea una dilatación de las células grasas haciéndolas más receptivas a la fase fría.






La segunda secuencia comienza con una rápida caída de la temperatura (el Shock Térmico) que conduce a la apoptosis (destrucción de las células grasas). El Shock Térmico también estimula el intercambio linfático y sanguíneo.





La secuencia final vuelve a utilizar altas temperaturas para reactivar el metabolismo. Los desechos resultantes de las células grasas destruidas se eliminan a través del sistema linfático y los procesos corporales normales en 2



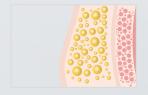

## % de sujetos que muestran mejoras

94% Satisfacción general

Moldeado corporal 87.5%

100% Mejoras en la piel

Estudio clínico llevado a cabo por Dr Philippe Blanchemaison, MD, de la Sociéte Française d'Accréditation Santé, París, Francia



## CryoSlim® en abdomen





Antes

CryoSlim® en flancos





- ✓ Schock Térmico
- ✓ Programas preestablecidos para cada zona corporal
- ✓ Protocolos y técnicas de masaje exclusivos







Cuando probé Cryoskin, perdí 2.5 cm en cada brazo en la primera sesión y eso me convenció de inmediato. Cryoskin tuvo un impacto económico positivo del 30% en nuestro negocio.

Ayse - Cryoskin owner, Enhance Clinic London


## The Cryoskin Method


## Cryo Cellulite

El protocolo Cryo Cellulite combina técnicas de destrucción de grasa y de tonificación de la piel. La técnica de destrucción de grasa elimina los adipocitos acumulados debajo de la piel, responsables del aspecto de piel de naranja. La técnica tonificante acelera el drenaje linfático, ayudando a eliminar fluídos y toxinas.

## ¿Qué es la celulitis?

La celulitis aparece cuando los adipocitos presentes bajo la hipodermis crecen y se agrupan en racimos que ejercen presión en la piel y conducen a la formación de piel de naranja. Al mismo tiempo, la hipodermis se inflama, comprimiendo los vasos sanguíneos y linfáticos, impidiendo el correcto drenaje.

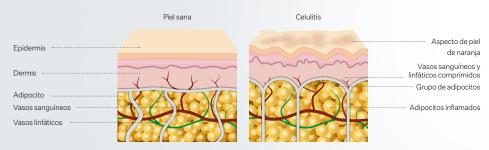

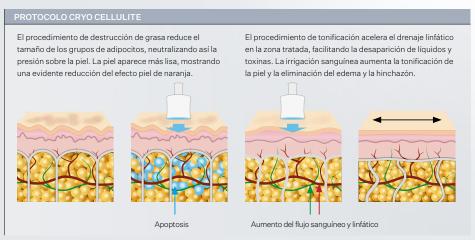

Mis clientas habituales son normalmente mujeres de 40 a 50 años para las que la celulitis es una gran preocupación que a menudo está asociada a retención de líquidos. Lo que más me qusta de Cryoskin es la posibilidad de ofrecer diferentes tratamientos para satisfacer las demandas de cada clienta.

Sandy - Sandy, Cryoskin owner, Cryo Solihull



## CryoTone®

El tratamiento CryoTone® utiliza bajas temperaturas para tonificar la piel y mejorar el metabolismo local.

CryoTone® se puede usar para tratamientos postparto, flacidez en los brazos, escote, etc. También es posible meiorar la firmeza de los senos. El frío tiene un efecto tensor instantáneo en la piel, pero CryoTone® también actúa a largo plazo estimulando la producción de colágeno y elastina, además de realizar un drenaje linfático de la zona tratada.





Tras 8 sesiones

## Cryo Cellulite





Antes

Tras 1 sesión

## Cryo Cellulite





Tras 10 sesiones

"Este estudio demostró principalmente un efecto de remodelación en la mayoría de los voluntarios. La reducción del aspecto poco atractivo de la "piel de naranja" y la mejora de la calidad de la piel fueron significativas."

Estudio clínico llevado a cabo por Dr Philippe Blanchemaison, MD, de la Sociéte Française d'Accréditation Santé, París, Francia




## The Cryoskin Method


# CryoLift®

CryoLift® es una solución natural y no invasiva antienvejecimiento para la cara y el cuello. Este procedimiento es particularmente eficaz para tensar la piel de cara y cuello, redefiniendo el óvalo facial. Además, proporciona una profunda y duradera reacción biológica al estimular la producción natural de colágeno y elastina.

## Envejecimiento de la piel

El proceso de envejecimiento hace que el metabolismo de la piel se haga más lento. Las células absorben menos nutrientes. Las fibras de colágeno y elastina se rompen y la dermis pierde elasticidad, favoreciendo la aparición de arrugas. Factores adicionales como el sol y la polución pueden acelerar este proceso.

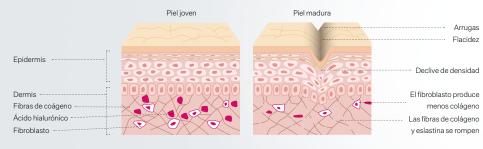

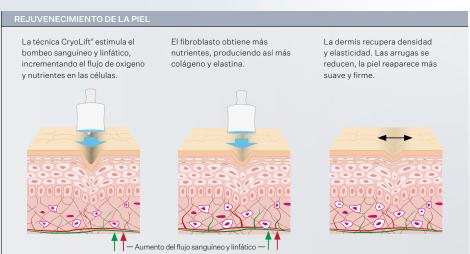

Una sesión dura 20 minutos y los resultados son inmediatos. Se recomienda una sesión a la semana durante cinco semanas y después una o dos veces al mes para el mantenimiento de los resultados. Así se consigue un efecto acumulativo que conduce a una mayor producción de colágeno y elastina.



Los CryoLifts tienen mucho éxito en nuestro spa. La cara muestra un resultado inmediato; yo me aplico una sesión al menos una vez cada dos semanas. La gente es muy proclive a cuidar el aspecto de su piel, por lo que el tratamiento facial nos proporciona una base de negocio muy estable. Con todos los programas que ofrece, Cryoskin ha sido definitivamente una gran incorporación a nuestro negocio.

Maria - Cryoskin owner, LondonCryo













## Cryo Doble Mentón

Cryo Doble Mentón es un protocolo específico para tratar el exceso de grasa y la piel flácida en el área del cuello, redefiniendo la línea mandibular.

Este método combina técnicas de tonificación y adelgazamiento, con 5 sesiones de 15 minutos.



Antes Tras 5 sesiones



## Cryoskin Révolution

### EFICIENT

Cryoskin Révolution es la máquina de producción de frío más potente del mercado. El nivel de calidad de su sistema de producción de frío Peltier permite trabajar de forma más rápida y profunda para obtener resultados instantáneos.

### SEGURO

Fabricado en Francia y cumpliendo con los estándares de calidad europeos CE, Cryoskin Révolution ofrece varios controles de seguridad como auto chequeos y alertas automáticas en caso de incidencia de flujo o temperatura.

Fabricado en Francia

### SENSACIÓN DE CONEODT

Los programas ya están preestablecidos para hombres y mujeres, con diferentes temperaturas adaptadas a las distintas partes del cuerpo. Esto permite obtener los mejores resultados, siendo muy agradable para los clientes.

### NUEVA PIEZA DE MANO ERGONÓMICA

- ✓ Ligera y compacta
- ✓ Fabricada con componentes de alta tecnología industrial aeronáutica
- ✓ Incorpora botones de mando para un control completo





### NUEVA INTERFAZ INTERACTIV

- ✓ Nuevo software que permite elegir los programas preestablecidos o seleccionar el Modo Experto para personalizar sus propios tratamientos
- ✓ Tutorial y videos integrados en el sistema
- ✓ Base de datos de clientes integrada: formulario de consulta, registro de medidas, etc.
- ✓ Nueva conexión WIFI que ofrece más funcionalidades como servicio postventa remoto







## ESPECIFICACIONES UNIDAD PRINCIPAL CRYOSKIN RÉVOLUTION

- Diámetro de la pieza de mano: 65 mm
- Diámetro de la superficie de transmisión en frío de la pieza de mano: 55 mm
- Botones de control de temperatura y programas directamente en la pieza de mano (inicio/pausa/siguiente secuencia)
- Longitud del cable: 2,5 m
- Dimensiones totales (largo x ancho x alto): 44 x 40 x 21 cm incluyendo el soporte de la pieza de mano
- Peso: 15,5 kg
- Temperatura mínima -10°C restringida a -8°C
- Temperatura máxima +41°C restringida a +40°C
- Shock Térmico de +40°C a -8°C
- Memoria ilimitada para registrar datos y nuevos programas
- Generador de frío propio
- · Sensor de temperatura en tiempo real
- Regulador y estabilizador electrónico de temperatura
- Fuente de alimentación universal: 110 230 V, 50/60 Hz
- · Consumo de energía: máximo 300 VA
- · Pantalla táctil LCD de 10" con sistema Android
- Biblioteca de programas preestablecidos
- · Modo Experto para personalizar sus programas
- · Clasificación: Aparato eléctrico Clase 1, Tipo B
- Fabricado en Francia

## Unidad estática opcional

## Ofrece tratamientos manos libres

La unidad estática permite realizar tratamientos de CryoSlim manos libres en las áreas más extensas del cuerpo. iTan solo has de colocar los 4 cryo heads en la parte a tratar y la máquina hará todo sola!

Dependiendo de tu tipo de clientela y de tu plantilla, puedes decidir equiparte con la unidad estática desde el principio o más adelante. No es necesario cambiar toda la máquina, las unidades son completamente compatibles.

Esta flexibilidad es única. Cryoskin Révoltion se adapta a tus necesidades y a tu capacidad de inversión.



- ✓ Los 4 cryoheads se pueden utilizar juntos o por separado. Esto permite tratar dos zonas diferentes al mismo tiempo.
- ✓ También pueden ser usados junto a la pieza de mano lo que permite usar al mismo tiempo CryoLift\* manual junto con CryoSlim® manos libres.





Cinturones extensibles preperforados para procedimientos manos libres. seguros y fáciles de usar

Permite a su operador dejar solo al cliente durante el procedimiento manos libres sin el menor riesgo.

- ✓ Nuevo estabilizador de temperatura para evitar variaciones durante el tratamiento
- ✓ Parada automática en caso de incidencia.
- ✓ Botón de parada manual para el cliente, que puede detener el programa en caso de incidencia cuando el operador no está en la cabina




## Crvo heads vs ventosas

La técnica de ventosas se inventó en USA hace 30 años. Es la primera generación de técnica de criolipólisis manos libres. Esta técnica ocasiona con frecuencia daños temporales o permanentes en la piel, ya que se estira fuertemente dentro de la copa. De hecho se requiere un periodo de entre 1 y 2 meses entre sesiones para permitir que la piel se cure. Numerosos clientes que se someten a procedimientos con ventosas declaran experimentar dolor.


Con el modo manos libres de Cryoskin Révolution, los 4 cryo heads eliminan la grasa sin succión, estiramiento, quemadura o daño en la piel. El frío penetra profundamente en las capas de grasa subcutánea ya que los cryo heads no se mueven durante el todo el tratamiento. Los clientes se pueden someter a una sesión cada 2 semanas (tiempo necesario para eliminar las células grasas destruidas). Esta mayor frecuencia de visitas permite un incremento considerable en la facturación.

### Ventosas de succión

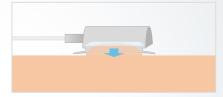

Con las ventosas de succión el área a tratar en una sesión es limitada, pues el frio solo puede alcanzar la grasa que abarca la ventosa.

### Cryo heads Cryoskin

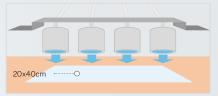


Los 4 cryo heads irradian frío o calor bajo la piel lo que permite abarcar áreas de hasta 20x40 cm, con un nivel de penetración del frío de hasta 4 cm.

## NUEVO ESTABILIZADOR DE TEMPERATURA

Otros dispositivos de producción de frío funcionan con modo on/off lo que implica que una vez alcanzada la temperatura deseada se detiene la refrigeración. Esto produce variaciones de temperatura que pueden afectar al resultado y, más importante, exponer al cliente a un riesgo.

El estabilizador de temperatura Cryoskin Révolution permite generar una temperatura estable en cada fase del tratamiento estático, lo que proporciona mejores resultados y mayor seguridad.

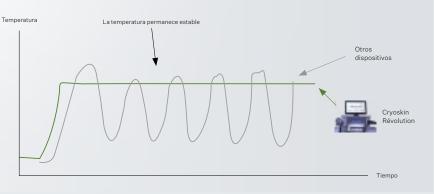

## ESPECIFICACIONES UNIDAD ESTÁTICA CRYOSKIN RÉVOLUTION

- · Diámetro de la cabeza estática: 90 mm
- Diámetro de la superficie de transmisión en frío del cabezal estático: 70 mm
- Diámetro de radiación de la cabeza estática: 10 mm
- · Longitud de los cables: 2,5 m cada uno
- Dimensiones totales de la unidad (largo x ancho x alto): 40 x 40 x 18 cm
- · Peso unitario: 20 kg
- · Temperatura mínima 0°C
- Temperatura máxima +41°C restringida a +40°C
- · Generador de frío proprio
- · Sensor de temperatura en tiempo real
- · Gestión electrónica de temperatura y estabilizador de temperatura
- · Parada automática del dispositivo en caso de temperatura irregular
- Botón de emergencia para que el cliente detenga la máquina
- Fuente de alimentación universal: 110 230 V, 50/60 Hz
- · Consumo de energía: máximo 350 VA
- · Pantalla táctil LCD de 10" con sistema Android
- · Biblioteca de programas preestablecidos
- Modo Experto para personalizar sus programas
- · Clasificación: Aparato eléctrico Clase 1, Tipo B
- · Fabricado en Francia

## DISTRIBUIDOR OFICIAL EN ESPAÑA: Bestetic Selection



info@besteticselection.com +34 667 738 551 www.besteticselection.com

Bestetic Selection Miriam Collado SL C/ Estación, 44 - 02600 Villarrobledo (Albacete) - España



Cryoskin Paris es parte de PRODESIGNPLUS group www.cryoskin-international.com | @cryoskinparis

CRYOSKIN RÉVOLUTION se fabrica en Francia por PRODESIGNPLUS Cryoskin es una marca registrada de PRODESIGNPLUS CRYOSKIN PARIS - 22 Chemin du Château d'Eau 95650 Boissy L'Aillerie - Francia